


## Instruções:

1

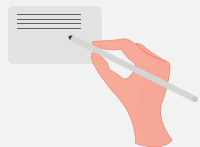

Identificar a embalagem com os dados pessoais da paciente.

2




Lavar as mãos com água e sabão.

3



Abrir o kit e pegar o autocoletor vaginal, composto pelo aplicador/haste plástica e o tecido.

4

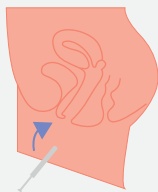

Após encontrar uma posição confortável, com a ajuda do aplicador (B), introduza o tecido (A) na vagina, deixando a parte terminal em V para fora (essa parte servirá para retirar o tecido coletor após o uso). Uma vez que o tecido coletor (A) esteja bem posicionado, retire o aplicador (B) e deixar o tecido dentro da vagina.

5



O tecido (A) deve permanecer na vagina por 5-10 minutos.

Certifique-se de que a parte terminal em forma V do tecido coletor permaneça fora da vagina.

6




Durante os 5-10 minutos, é possível realizar quaisquer movimentos.

7



Após 5-10 minutos, lavar as mãos com água e sabão.

8

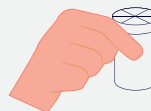


Colocar o tubo (C) sobre uma superfície plana (não fechar o tubo até inserir o tecido coletor).

9




Remover o tecido (A) da vagina, usando a parte terminal em forma de V. Não tocar em nenhuma outra parte do tecido coletor.

10

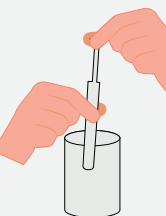

Armazenar o tecido coletor (A) no tubo (C). Fechar o tubo (C) rosqueando a tampa corretamente. Uma vez fechado, não tentar abrir novamente. Manter o kit refrigerado (2° a 8°C) até o momento da entrega.

11

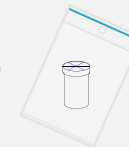

Colocar o tubo (C) com o tecido no saco plástico de transporte de amostra.

12



Armazenar em local limpo e seco. Manter longe de fontes de calor. Após a coleta, manter o kit refrigerado (2° a 8°C) até o momento da entrega.

### QUANDO PODE SER USADO ESSE KIT?

Este dispositivo é indicado para coleta de amostra da cavidade vaginal.

### MUITO IMPORTANTE:

Relaxe e escolha a posição mais confortável para você (sentada com as pernas abertas, em pé com uma perna levantada ou em pé com as pernas levemente flexionadas). Separe os lábios localizados na abertura da vagina. Introduza cuidadosamente o tecido com o seu aplicador. Continue empurrando o tecido e o aplicador em direção à área de aderência. A parte terminal em forma de V deve ficar pendurada livremente na parte externa da vagina. Após a introdução do tecido com o aplicador/haste plástica, retire o aplicador da vagina.

### CUIDADO:

Para retirar o aplicador/ haste plástica, puxe-o levemente com cuidado para não puxar o tecido. Elimine o aplicador usado com o lixo infectante ou o doméstico normal. Dependendo do tamanho da vagina e de como o tecido intravaginal foi inserido, é obrigatório que a parte terminal em forma de V permaneça visível para que possa ser removida após o uso.

### COMO REMOVER O TECIDO COLETOR?


Lave as mãos e seque-as com um pano limpo. Relaxe e escolha a posição que mais lhe convier (sentada com as pernas afastadas, em pé com uma perna para cima ou com as pernas dobradas). O tecido é facilmente removido puxando a parte em forma de V. Insira o tecido coletor no frasco adicional fornecido. Uma vez devidamente fechado, não tente abri-lo novamente.

### RECOMENDAÇÕES E DICAS:


- Lave adequadamente as mãos antes de usar esse dispositivo de coleta.
- Não use se você teve atividade sexual nos últimos 2 dias.
- Não use se você fez uma lavagem vaginal nas últimas 48 horas.
- Se estiver grávida ou tiver sangue na cavidade vaginal, use esse dispositivo de coleta apenas sob recomendação do seu médico.
- O tecido não pode e não deve permanecer na vagina por mais de 30 minutos, mas se você esquecer de retirá-lo, retire-o assim que se lembrar.
- Use apenas um autocoletor vaginal de cada vez.
- Não reutilize o autocoletor vaginal, mesmo que não esteja impregnado com fluidos corporais.
- Para mais recomendações, pergunte ao seu médico.
- Não descarte o produto no meio ambiente.

## Componentes:

### 1 Coletor vaginal

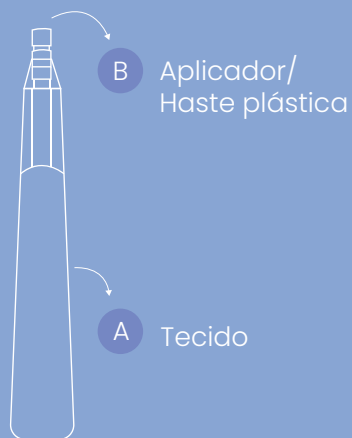

### 2 Tubo

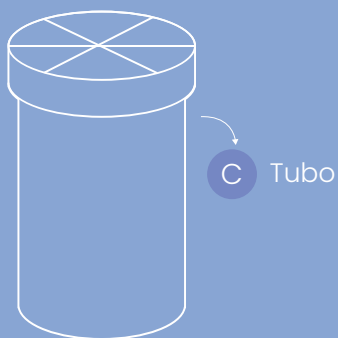

## PARA QUEM ESTE PRODUTO É ESTRITAMENTE PROIBIDO?

### Para pessoas que:

- Têm febre ou sintomas semelhantes aos da gripe, mesmo que sejam leves.
- Possuem experiência prévia com choque tóxico.
- Têm alergia a plásticos e derivados.
- Indivíduos virgens.
- Estar em período menstrual.

### TESTES REALIZADOS NO AUTO COLETOR VAGINAL:

- Citotoxicidade (sem efeito citotóxico potencial).
- Sensibilização (sem efeito potencial de sensibilização).
- Irritação vaginal (durante 5 dias consecutivos sem efeito potencialmente irritante ao tecido vaginal).
- Capacidade de absorção do tecido (1,4 g).

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SÍNDROME DE CHOQUE TÓXICO:

A síndrome do choque tóxico (SCT) é uma infecção rara, mas potencialmente perigosa. Pode acontecer com crianças, homens e mulheres (com ou sem menstruação). É causada por uma toxina produzida por uma bactéria (*Staphylococcus*) comumente encontrada no corpo humano. Metade dos casos de SCT conhecidos até hoje ocorreram entre mulheres e adolescentes menstruadas. A SCT está associada ao uso de absorvente interno, mas também pode ocorrer em períodos em que são utilizados outros meios de proteção (protetores menstruais, absorventes íntimos, etc.). A SCT é uma infecção que pode ser mortal, por isso deve ser identificada muito cedo e curada rapidamente. Os sintomas da SCT podem aparecer repentinamente durante os períodos e podem não aparecer todos simultaneamente: febre repentina, vômitos, diarreia, dor de garganta, tontura, desmaio, dores musculares, erupção cutânea que se assemelha a uma queimadura solar (a pele pode descascar alguns dias depois). Se tiver esses sintomas, deve retirar o tecido, dirigir-se ao seu médico ou ao médico mais próximo disponível, indicando que está menstruada. A SCT pode ocorrer com ou sem o uso do tecido. Se você já teve a SCT, pergunte ao seu médico se você pode usar o autocoletor vaginal. Se você usar o autocoletor vaginal corretamente e respeitar essas recomendações, o risco de desenvolver a SCT diminui.

### CONSERVAÇÃO:

Armazenar em local limpo e seco. Manter longe de fontes de calor. Após a coleta, manter o kit refrigerado (2 a 8°C) até o momento da entrega.

Não use o produto se a embalagem estiver danificada ou após a data de validade.

Se, apesar de todo o cuidado que dedicamos à fabricação de nossos produtos, você achar que tem um produto com defeito, não o utilize e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou o distribuidor, indicando com precisão o problema encontrado, bem como o número do lote especificado na embalagem.



Ficou com dúvidas? Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ao lado e assista ao vídeo

### IMPORTADOR:

Mobius Life Science Comércio de Produto para Laboratórios Ltda  
Rua Jandaia do Sul 441 Pinhais-PR CEP : 83.324-440  
Telefone: (41) 3401-1850  
Rua Paraíso do Norte, 866 – Pinhais – PR – CEP: 83324-221  
Telefone: (41) 3401-1850 | 0800-7101850  
E-mail: suporte@mobiuslife.com.br | Website: www.mobiuslife.com.br  
CNPJ: 04.645.160/0001-49